

顎式破碎機JC5/JC6適合於對硬性、中硬性、脆性及硬韌性的材料進行快速的粗粉碎和預粉碎處理，其粉碎顎板共有五種材質可供選擇。

產品應用

礦業/冶金業：鈮鐵合金、碳化鎢、礦石、煤、礦渣、焦炭

化學製品：化學工業原材料

玻璃工業：搪瓷用玻璃、玻璃原材料

陶瓷工業：滑石、燒結黏土、燒結陶瓷、電陶瓷

建築材料：鋁土礦、磚渣、石英、水泥


地質/礦物學：岩石、花崗石、玄武岩、重晶石、矽酸鹽

優點

- 最終出料尺寸小($d_{90} < 0.5\text{mm}$)
- 零點校正以補償磨損
- 樣品收集盤未放入，機器無法啟動
- 可翻置進料斗，有效防止樣品噴出
- 五種不同材質的粉碎顎板可供選擇




桌上型顎碎機 JC6

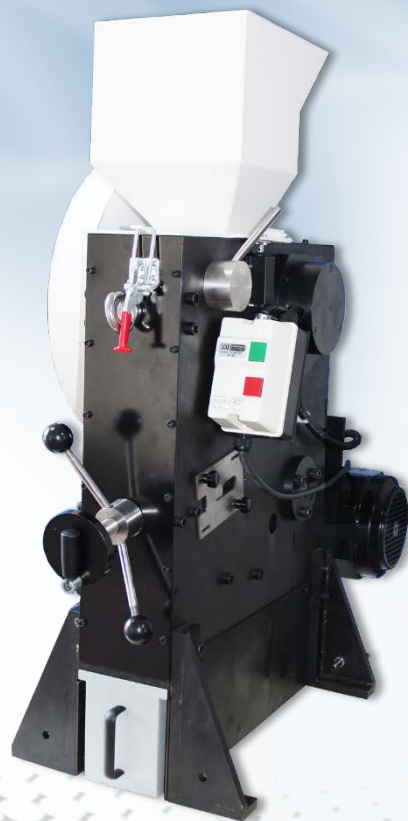

落地型顎碎機 JC5

- **錳 鋼**：此材質受到擠壓後，其結構會發生稠密化，因而會在使用中逐漸變硬，適用於處理中硬性、硬性樣品。
- **不銹鋼**：可避免生銹問題，適合處理硬度不高的樣品。
- **碳化鎢**：耐刮磨。對於莫氏硬度值7-8的樣品，仍能長時間使用。
- **氧化鋁**：專門用於處理不含重金屬成分的陶瓷類材質，且不會污染所粉碎的樣品。
- **無重金屬鋼**：不含重金屬物質，可避免刮磨時對樣品造成重金屬污染。適用於對不太具有磨蝕性的材料進行無重金屬成分的粉碎處理。

顎板材質

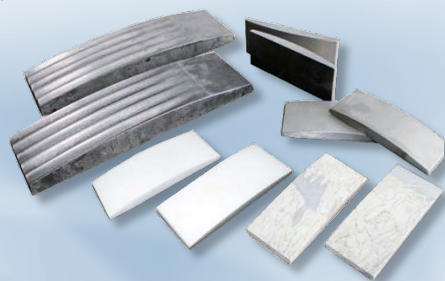

規格參數

型 號	JC5	JC6
進料尺寸	< 90 mm	< 40 mm
出料尺寸	< 2 mm	< 0.5 mm
轉 速	690 rpm/min	500 ~ 1000 rpm/min
接收槽容積	5 L	3 L
顎板寬度	99 mm	59.5 mm
顎板間隙寬度調整	0 ~ 30 mm	0 ~ 11 mm
零點校正	有	有
電 源	380 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz
功 率	2.2 kW	1.1 kW
尺 寸	440 x 930 x 1090 mm	450 x 630 x 490 mm
重 量	330 kg	83 kg